

Trokarer


Truly customised laparoscopic solutions




Et omfattende sortiment af ergonomisk designede trokarer, som giver enkel og sikker adgang til bughulen.

- Gennemsigtigt, riflet hylster til instrumentvisualisering og effektiv fastholdelse i bugvæggen
- Robust universalmembran, der passer til 5-12 mm instrumenter* samtidig med at penumoperitoneum bevares

* Til trokar med diameter på 12 mm.

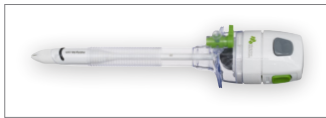


Afskærmet trokar, skærende

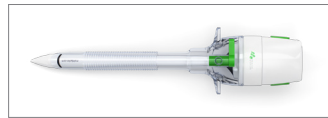


Ikke-skærende trokar med dilaterende spids




Optisk trokar med dilaterende spids - pistolgreb

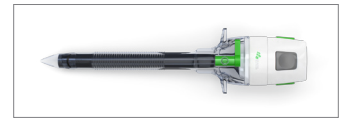


Optisk trokar

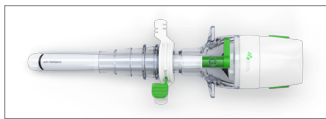


Hasson trokar

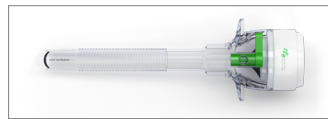

Universel port

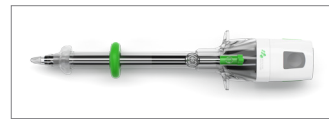

Optisk ballontrokar

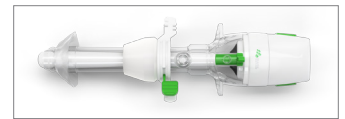

Hasson ballontrokar

Afskærmet trokar, skærende

Udstyret med et skarpt lineært blad og en enkel intuitiv afskærmningsmekanisme, som forhindrer utilsigtet vævsbeskadigelse især i forbindelse med placering ved den "blinde" port.

- Skarpt lineært blad, som kun kræver minimal kraft ved indførelse og giver reduceret brist af fascien
- Reduceret bladbredde minimerer laceration og optimerer vævsdilatation

Ikke-skærende trokar

Designet til at separere snarere end at lacerere væv, hvilket nedsætter brist af fascien sammenlignet med trokarer med blad. Dette giver mindre behov for fascielukning.

- Minimerer beskadigelse af portstedet og fremmer hurtig heling
- Nedsat hyppighed af brokdannelse på portstedet

Optisk trokar

Optisk trokar tillader direkte visualisering af lagene i bugvæggen, når trokaren indføres. Herved reduceres risikoen for trokarrelaterede skader især i forbindelse med den primære anlæggelse af port.

- Giver sikker indføring i bugvæggen
- Design med dilaterende spids minimerer skader på portstedet og risiko for post-operativ brokdannelse

Hasson trokar

Hasson-trokarer er udviklet til kirurger, som foretrækker sikkerheden ved den åbne teknik til den primære anlæggelse af port.

- Design med stump spids forhindrer utilsigtet beskadigelse af de indre organer under indføring
- Hylsterets dybde kan hurtigt justeres ved hjælp af den enkle og effektive fikseringsanordning

Universelle porte

Kompatible med alle obturatorer af samme størrelse (afskærmede med blad, uden blad, optisk) hvilket giver maksimal effektivitet med hensyn til bestilling, opbevaring og udgiftsbesparelser.

Ballonfikserede trokarer

- Giver forbedret atraumatisk portfiksering i bugvæggen, forebygger at porten flytter sig selv under lange indgreb og hurtige instrumentudskiftninger
- Reducerer den del af porten, som er inde i abdomen, hvilket giver øget kirurgisk plads og optimerer visualisering, samtidig med at penumoperitoneum bevares

Alle trokarer og porte leveres både sterilt, enkeltpakket og i Mölnlycke procedurepakker.

Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Pakn.**
899300	Afskærmet trokar, skærende	5mm	70mm	5/60
899301	Afskærmet trokar, skærende	5mm	100mm	5/60
899302	Afskærmet trokar, skærende	11mm	100mm	5/60
899303	Afskærmet trokar, skærende	11mm	150mm	5/30
899304	Afskærmet trokar, skærende	12mm	100mm	5/60
899305	Afskærmet trokar, skærende	12mm	150mm	5/30
899308	Ikke-skærende trokar, dilat.	5mm	70mm	5/60
899309	Ikke-skærende trokar, dilat.	5mm	100mm	5/60
899310	Ikke-skærende trokar, dilat.	11mm	100mm	5/60
899311	Ikke-skærende trokar, dilat.	11mm	150mm	5/30
899312	Ikke-skærende trokar, dilat.	12mm	100mm	5/60
899313	Ikke-skærende trokar, dilat.	12mm	150mm	5/30
899336	Ikke-skærende trokar, dilat.	15mm	100mm	5
899314	Optisk trokar, pistolgreb	11mm	100mm	5/30
899315	Optisk trokar, pistolgreb	12mm	100mm	5/30
899316	Optisk trokar	5mm	70mm	5/60
899317	Optisk trokar	5mm	100mm	5/60

Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Pakn.**
899324	Optisk trokar	5mm	150mm	5/45
899318	Optisk trokar	11mm	100mm	5/60
899325	Optisk trokar	11mm	150mm	5/30
899319	Optisk trokar	12mm	100mm	5/60
899326	Optisk trokar	12mm	150mm	5/30
899320	Universel port	5mm	70mm	5/60
899321	Universel port	5mm	100mm	5/60
899322	Universel port	11mm	100mm	5/60
899323	Universel port	12mm	100mm	5/60
899306	Hasson trokar	11mm	100mm	5/60
899307	Hasson trokar	12mm	100mm	5/60
899330	Optisk ballontrokar	5mm	70mm	5/60
899327	Optisk ballontrokar	5mm	100mm	5/60
899331	Optisk ballontrokar	11mm	100mm	5/60
899328	Optisk ballontrokar	12mm	100mm	5/60
899329	Hasson ballontrokar	12mm	100mm	5/60

** Inderæske/transportkarton

Læs mere på www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf.: 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere virksomheder i Mölnlycke Health Care Gruppen. ©2017
Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0331706


Mölnlycke®